

TUBE


HIGH PERFORMANCE
Malleable Penile Prosthesis
SEMI-RIGID

TUBE Prótesis Peneana Maleable Semi-rígida

TUBE Prótesis Peneana Maleable Semi-rígida es un implante maleable, semi-rígido, que ha sido desarrollado para ser utilizado en el tratamiento quirúrgico de la disfunción eréctil. El implante de una prótesis peneana TUBE le permitirá al paciente volver a tener una vida sexual activa y satisfactoria

Diseño de la Prótesis

- **TUBE Prótesis Peneana Maleable Semi-rígida** está diseñada para su inserción quirúrgica en los cuerpos cavernosos del pene. Consiste en dos hemiprótesis o cilindros compuestos de un núcleo de plata, recubierto con un tubo de politetrafluoretileno (PTFE); todo a su vez contenido dentro de una cubierta de silicona sólida.

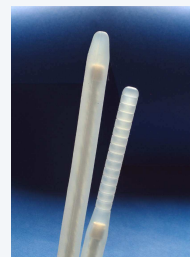

Seguridad y Confort


- El núcleo de plata recubierto en PTFE está contenido en una cobertura formada con tres tipos de elastómeros de silicona.
- El diseño único de esta prótesis garantiza la correcta dureza de la silicona en cada segmento de la prótesis: el extremo distal es de menor dureza, minimizando el riesgo de irritación y erosión. El extremo proximal tiene mayor dureza, mejora la rigidez de la prótesis y asegura confort al paciente.
- La superficie externa del cuerpo de silicona está diseñada para prevenir la rotación del implante y promover la integración con el tejido circundante.

- El extremo proximal recortable junto a los extensores de silicona radiopaca ofrecen una amplia gama de longitudes de prótesis que se ajustan a la anatomía de cada paciente.



Fácil colocación

- La sección proximal del implante puede ser recortada cada 5 mm para que ajuste de manera precisa en la anatomía del paciente.
- Extensores de silicona radiopacos de 10 mm y 15 mm pueden ser utilizados para extender la longitud, colocándose en la sección proximal del implante para:
 - Ajustar la longitud final del implante a la anatomía del paciente.
 - Otorgar una forma cónica al extremo proximal del implante para adaptarlo a los cuerpos cavernosos del pene.

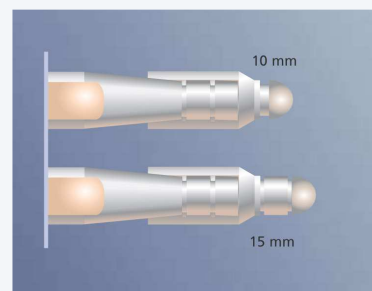

¿Cómo funciona la Prótesis Peneana TUBE?

- Si bien es un implante que se coloca para brindar rigidez al pene, la flexibilidad de la prótesis permite posicionarla manualmente en erección para la relación sexual, o en posición de descanso para su disimulo.
- Para llevar a cabo el acto sexual, el paciente deberá colocar manualmente la prótesis en posición erecta. Asimismo, es posible colocar el pene en posición de descanso gracias a la excelente flexibilidad que otorga el material del implante.
- En la posición erecta, la prótesis hace que el pene tenga la funcionalidad de una erección normal. La prótesis peneana no cambia la sensación o



Prótesis en posición erecta



Prótesis en posición de descanso

sensibilidad de la piel del pene o la habilidad del hombre para alcanzar el orgasmo. Tampoco es afectada la eyaculación.

- De las opciones similares existentes, **TUBE Prótesis Peneana Maleable Semi-rígida** es la que ofrece el mejor ángulo de quiebre sin riesgo de “retorno” (memoria de material).
- **TUBE Prótesis Peneana Maleable Semi-rígida** se presenta en un amplio rango de tamaños, de manera de ofrecer al cirujano alternativas que se ajusten a cada caso, escogiendo el más apropiado para el paciente.
- El tamaño final del implante se regula tanto a través de su extremo recortable y con la colocación de extensores (rear tips) de silicona sólida radiopacos para prolongar la longitud de la prótesis.

¿Por qué elegir TUBE Prótesis Peneana maleable?

- Fácilmente implantable, colocación mediante un procedimiento mínimamente invasivo y rápido.
- Núcleo de filamentos de plata trenzados garantiza la rigidez y maleabilidad del implante.
- Máxima seguridad: núcleo de plata recubierto por tubo de teflón.
- Cubierta cónica de elastómeros de silicona biocompatible.
- Maleabilidad única: permite al paciente colocar la prótesis en un ángulo de hasta 130°.
- Resistente a las torsiones y buena memoria de posicionamiento, confiriendo al implante una vida útil extensa.
- Extensores de silicona sólida radiopacos provistos por separado: las medidas de las prótesis se adaptan a la anatomía del paciente.

Eficacia de TUBE en el tratamiento de la Disfunción Eréctil

- La prótesis peneana TUBE es una solución definitiva para la disfunción eréctil. Puede ser implantada muy fácilmente, garantizando un procedimiento quirúrgico seguro.
- Ha sido utilizada por más de una década con resultados satisfactorios. El implante de una prótesis peneana TUBE le permitirá al paciente volver a tener una vida sexual activa y satisfactoria.

Técnica Quirúrgica

La cirugía para la colocación de **TUBE Prótesis Peneana Maleable Semi-rígida** es mínimamente invasiva, reproducible y requiere una curva de aprendizaje corta.

- Técnica quirúrgica colocación **TUBE Prótesis Peneana Maleable Semi-rígida**

[Ver Video»](#)

Para acceder, regístrese en la sección Médicos de nuestro sitio

La descripción de la técnica quirúrgica, selección de pacientes, advertencias, contraindicaciones y precauciones a tener en cuenta se encuentran desarrolladas en el Manual de Usuario de **TUBE Prótesis Peneana Maleable Semi-rígida**. Se sugiere consultar este material para obtener mayor información.

Para descargar

- Catálogo de **TUBE Prótesis Peneana Maleable Semi-rígida**
- Manual de Usuario de **TUBE Prótesis Peneana Maleable Semi-rígida**
- Evidencia Clínica

Para consultas sobre **TUBE Prótesis Peneana Maleable Semi-rígida**, contacte el Centro de Educación Médica de Promedon, menhealth@promedon.com